

VOL.14



Wheel Chair 河村轮椅

河村轮椅，为您创造更积极、更舒适的生活。

KOBE JAPAN



公司简介

Company profile

日本河村株式会社成立于1995年，是日本轮椅车专业生产厂家。1996年首次将超轻的7000系航天铝合金材料使用在轮椅车上，获得好评。1997年首次在所有轮椅车的座背垫加上10mm泡棉，之后成为轮椅车业界通用装备。公司拥有先进的轮椅车检测中心，具备耐疲劳性走行，耐荷重负荷，耐冲击力等性能检测的能力。

公司股票于2004年在东京证券交易所成功上市。目前是日本MAX株式会社的子公司，并且公司已获得JIS日本工业规格标准认证，SG产品安全协会标志认证，ISO14001环境管理体系，ISO9001质量体系认证。

2001年2月投资成立了漳州立泰医疗康复器材有限公司，总投资额为620万美金，占地6万㎡。公司拥有先进的X线透视检查机，金属成分分析机和RoHS材质分析仪等检测设备。漳州立泰医疗康复器材有限公司亦获得了JIS日本工业规格标准认证，SG产品安全协会标志认证，ISO9001及ISO13485质量体系认证。

公司以【安全 安心】及【环保】为主旨，用心为顾客创造出品质、性能优良的产品。

日本河村株式会社

日本国兵库县神户市西区上新地3-9-1 〒651-2411



日本河村株式会社全资子公司

漳州立泰医疗康复器材有限公司

福建省漳州市长泰县古农农场银塘工业区 〒363900

TEL:0592-6328802

FAX:0592-6328813



安全 · 安心的生产配合

材料 · 零件的品质 为了保护环境及确保品质，对金属 · 布料 · 树脂等进行材质分析。

来料检查

来料时，对不符合规格及不符合订单要求的产品严格进行检查。



金属成分分析机



X线分析器



X线透视检查装置



硬度计



万能试验机



盐雾试验机

履历管理

从来料到组装、出货全部进行批量记录管理。

生产的品质

品质管理

- 数据管理 (扭力 · 张力 · 摇摆度等)
- 5S
- 教育 · 培训

环保型设计

- 便于拆卸的车架构造
- 耐久性好，牢固安全的轮椅车
- 采用可循环利用的材料

履历管理

对所有生产流程进行检查，检查结果以书面及照片形式全面进行记录。

认证取得

- ISO13485&ISO9001
- 日本产业规格认定工厂
- 日本产品安全协会认定工厂



校正



车轮摇摆校正

车架组装

检查

针车缝制

检查

零件组装

检查



出货检查

来料 · 入库

检查

金属加工

检查

焊接

检查

校正

检查

烤漆

检查

完成品组装

检查

包装

检查

出货

使用方便的标准型，推荐给需要外出的人。

KMD A-style

自走用
(护理兼用) **22** 后轮
in



座背垫: NO. 68


KMD-A22-40(42·45)-M(H/SH)

中·高座面

(14.5kg)

SY2-KMD-40(42·45)

●折叠尺寸 全长94×全高64(66/68)×全宽30

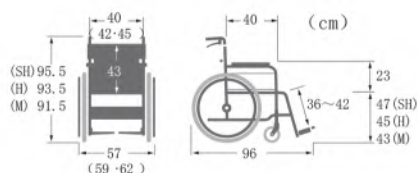

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

护理用 **16** 后轮
in



座背垫: A10


KMD-A16-40(42·45)-M(H/SH)

中·高座面

(13.6kg)

SY1-KMD-40(42·45)

●折叠尺寸 全长85×全高64(66/68)×全宽27

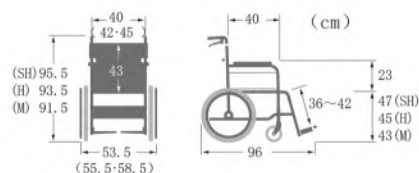

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

下单时请选择



●座宽选择

40·42·45cm

※座宽选择，在坐下来的状态下臀部宽度+3~5cm，护理人员的手可以伸进去程度。

※45cm座背垫颜色仅NO. 82/NO. 83/NO. 85/A9/NO. 19可选



●座高选择


43·45·47cm

9 color

●座背垫颜色选择

9色

※45cm座宽5色选择

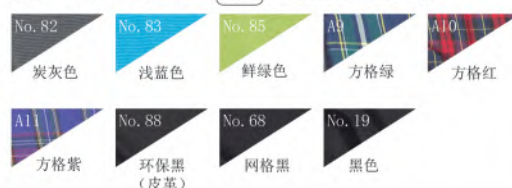

KMD A-style 的特征



合身 Fitting

无需使用工具即可
调节脚踏板的高度。

(螺纹自锁调节功能)
※图片是B-style。



刹车手柄可延长10cm，
使用者更容易操作。



操作性 Usability



在室内 In the room

紧凑型设计，在室内也能自在穿梭，
可以顺利出入室内。

主车架使用的是7000系铝合金，
此材料也广泛使用于飞机。

耐用性 Strong



脚部和扶手部位可动的多功能型，确保了上下轮椅的空间。
推荐给经常需要移乘的人。

KMD B-style

自走用
(护理兼用) **22** 后轮
in




座背垫: NO. 68

KMD-B22-40(42·45)-M(H/SH)

中·高座面 (16.3kg)

SY2-KMD-40(42·45)

●折叠尺寸 全长76.5×全高66.5(68.5/70.5)×全宽30

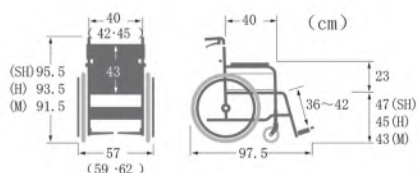

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

护理用 **16** 后轮
in




座背垫: A11

KMD-B16-40(42·45)-M(H/SH)

中·高座面 (15kg)

SY1-KMD-40(42·45)

●折叠尺寸 全长67.5×全高66.5(68.5/70.5)×全宽27

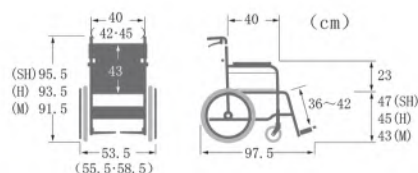

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

下单时请选择



●座宽选择 40·42·45cm

※座宽选择，在坐下来的状态下臀部宽度+3~5cm，护理人员的手可以伸进去程度。

※45cm座背垫颜色仅NO. 82/NO. 83/NO. 85/A9/NO. 19可选。



●座高选择 43·45·47cm

9 color

●座背垫颜色选择 9色

※45cm座宽5色选择

No. 83 浅蓝色

No. 85 鲜绿色

A9 方格绿

A10 方格红

A11 方格紫

No. 88 环保黑(皮革)

No. 68 网格黑

No. 19 黑色

脚部选择



原装活动脚
脚部可向内外旋转。



定制骨科脚
脚部角度可上下调节。



KMD B-style 的特征



合身 Fitting

可根据体型调节背垫松紧度，减轻背部压力，乘坐更舒适。



容易抓握的扶手开关，操作简单。



〈掀起时〉



〈活动脚向外旋转时〉

移乘 Transfer




脚驱动 Foot drive

脚部可拆下用脚驱动，可做脚部复健。



紧凑型设计，方便收纳于角落。

收纳 Storage

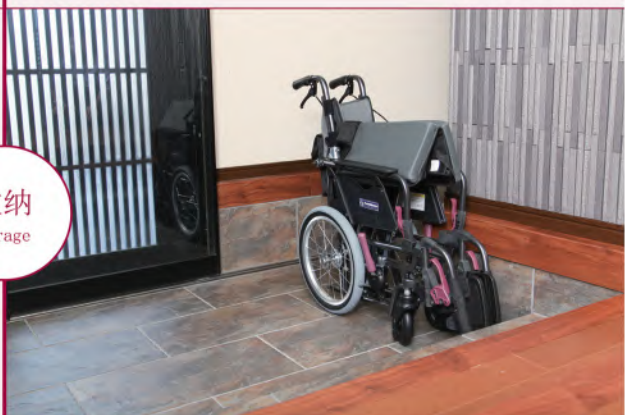

脚部和扶手部位可动的多功能型，方便使用者上下轮椅。
增加了扶手高度调节功能，推荐给需要加垫坐垫以及身高较高的人。

KMD C-style

自走用
(护理兼用) **22** 后轮
in




座背垫: NO. 85

KMD-C22-40(42·45)-M(H/SH)

中·高座面 (17.2kg)

SY2-KMD-40(42·45)

●折叠尺寸 全长76.5×全高66.5(68.5/70.5)×全宽30

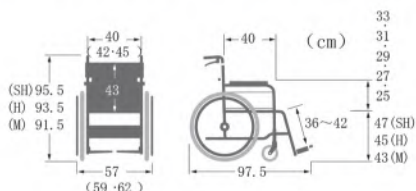

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

护理用 **16** 后轮
in




座背垫: A9

KMD-C16-40(42·45)-M(H/SH)

中·高座面 (15.9kg)

SY1-KMD-40(42·45)

●折叠尺寸 全长67.5×全高66.5(68.5/70.5)×全宽27

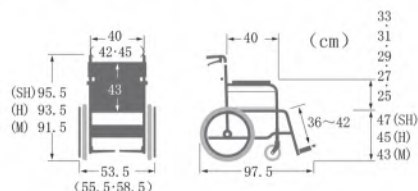

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

下单时请选择



●座宽选择 **40·42·45cm**
※座宽选择，在坐下来的状态下臀部宽度+3~5cm，护理人员的手可以伸进去程度。

※45cm座背垫颜色仅NO. 82/NO. 83/NO. 85/A9/NO. 19可选



●座高选择 **43·45·47cm**

9
color

●座背垫颜色选择 **9色**
※45cm座宽5色选择

No. 83
浅蓝色

No. 85
鲜绿色

A9
方格绿

A10
方格红

A11
方格紫

No. 88
环保黑(皮革)

No. 68
网格黑

No. 19
黑色

脚部选择



原装活动脚
脚部可向内外旋转。



定制骨科脚
脚部角度可上下调节。



KMD C-style 的特征



合身 Fitting

需要加厚座垫的时候，
可将扶手调节至合适的高度。

※25~33cm(间距2cm)

移乘时停车刹车手把可收至
座面以下位置，方便移乘。



移乘 Transfer



贴近 Approach

在洗手池以及厨房等不需要用到脚部的地方，
脚部可向外打开，以便更贴近需要靠近的地方。

也方便护理人员使用的形状。



为护理 人员考量 For helper



推荐给女性以及力气弱小群体的轻量型轮椅

KF/KFP 系列

KF

标准型

自走用
(护理兼用) **22** 后轮
in



护理用 **16** 后轮
in



KF22-40(42)SB

SY2-KF-40(42)

中座面 前轮6in

(10.8kg)


KF16-40(42)SB

SY1-KF-40(42)

中座面 前轮6in

(9.7kg)

● 折叠尺寸 22in: 全长93×全高66×全宽33
16in: 全长84×全高66×全宽28

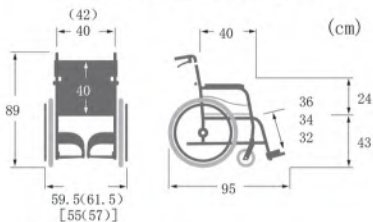

* [] 内为16in的尺寸
* 各尺寸不含座背垫等的厚度。

KFP

多功能型



自走用
(护理兼用) **22** 后轮
in



护理用 **16** 后轮
in



KFP22-42SB

SY2-KFP-42

中座面 前轮6in

(11.9kg)


KFP16-42SB

SY1-KFP-42

中座面 前轮6in

(10.6kg)

● 折叠尺寸 22in: 全长71.5×全高66×全宽33
16in: 全长62.5×全高66×全宽28

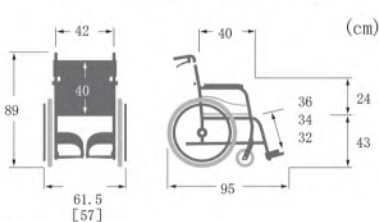

* [] 内为16in的尺寸
* 各尺寸不含座背垫等的厚度。

轻量标准型，方便搬运

特别适合女性及力气弱小的群体

自走用
(护理兼用) **10.6 kg**

护理用 **9.6 kg**



在确保原本的强度的基础上，调整了制造精度和各部位零配件，自走护理两用，总重量却不超11kg。

专用铝前叉等

操作简单的扶手开关



为了便于识别操作部位，扶手开关采用显眼的颜色。

另外，扶手开关的形状也设计成便于手指按压的形状。



KF&KFP系列的特长

标准车感觉的轻量轮椅

不省略轮椅的必要机能的基础上实现轻量化

① 上掀式活动扶手

扶手可向后方掀起，方便顺利从床等其他地方移乘到轮椅。



⑤ 脚后跟带标准配备

防止脚向后滑落，脚踏板掀起时，处于方便乘坐和站起的状态。



② 便于驱动的靠背角度

靠背角度设计为8度后倾，让背垫更贴合背部，驱动的时候不容易干涉手腕。



⑥ 脚踏板高度调节

可三阶段调节。
(间距2cm)



③ 加长的扶手

加长扶手到确保站立时候容易支撑的位置。



④ 活动脚 (仅限KFP)

脚部能够打开和拆卸，方便移乘。



下单时请选择



●KF座宽选择 40+42cm

●KFP座宽选择 42cm

※座宽选择，在坐下来的状态下臀部宽度+3~5cm，护理人员的手可以伸进去程度。



●座背垫颜色选择 2色

No. 96



粉色

No. 97



水蓝色

充满设计感的轻量型轮椅

CHL 系列



自走用
(护理兼用) **22** 后轮
in




座背垫: NO. 81

CHL22-40B 中座面 前轮6in (11.2kg)

SY2-CHL-40B

●折叠尺寸 全长94×全高66×全宽32

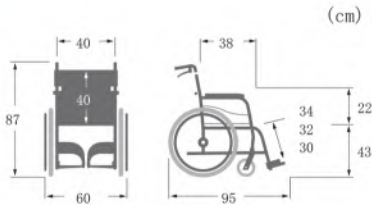

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

护理用 **16** 后轮
in




座背垫: NO. 80

CHL16-40B 中座面 前轮6in (9.9kg)

SY1-CHL-40B

●折叠尺寸 全长83×全高66×全宽26

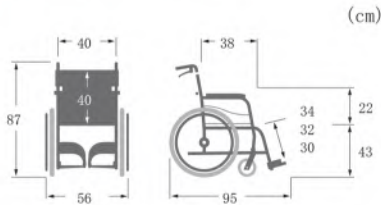

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

●简易调节式背垫



附收纳袋、可拆卸

●脚踏板高度调节



3阶段调节
(间距2.5cm)

下单时请选择

2
color

●座背垫颜色选择 2色

No. 80

No. 81



深紫色



条形绿

大座宽标准型轮椅

BM 系列



BM-SB

鼓式刹车 新型不爆胎 厚座背垫乘坐更舒适



座背垫调节 座背垫可拆卸

护理用 **16** 后轮 in




BM22-45SB-M 中座面 前轮7in (15.8kg)

SY2-BM-45

BM16-45SB-M 中座面 前轮7in (13.8kg)

SY1-BM-45

- 折叠尺寸 22in: 全长97×全高66.5×全宽33
- 16in: 全长89×全高66.5×全宽30 (cm)

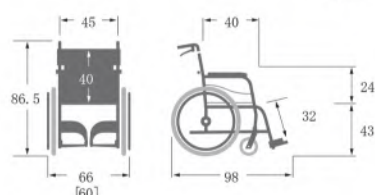

* [] 内为16in的尺寸
* 各尺寸不含座背垫等的厚度。
* 重量、尺寸会存在一定的误差，请理解。

● 座背垫可调节

可根据使用者背部和臀部的形状调节座背垫。



下单时请选择

2 color ● 座背垫颜色选择 (2色)



方格紫



方格绿

BM-S

连动式刹车 PU胎 一体式座背垫使用更简单

护理用 **16** 后轮 in




BM22-45S 中座面 前轮6in (13.3kg)

SY2-BM-45

BM16-45S 中座面 前轮6in (11.7kg)

SY1-BM-45

- 折叠尺寸 22in: 全长96.5×全高66×全宽34
- 16in: 全长89×全高66×全宽30 (cm)

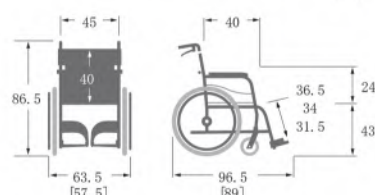

* [] 内为16in的尺寸
* 各尺寸不含座背垫等的厚度。
* 重量、尺寸会存在一定的误差，请理解。

下单时请选择

2 color ● 座背垫颜色选择 (2色)



方格蓝



酒红色

推荐身高较高的人群使用的多功能型轮椅

KZM 系列


自走用
(护理兼用) **22** 后轮
in



KZM22-40(42)-45	高座面	前轮6in	(16.5kg)
KZM22-40(42)-43	中座面	前轮6in	(16.5kg)
KZM22-40(42)-41	低座面	前轮6in	(16.5kg)

SY2-KZM-40(42)

- 折叠尺寸 高床: 全长72.5×全高74×全宽34
中床: 全长72.5×全高72×全宽34
中床: 全长72.5×全高70×全宽34

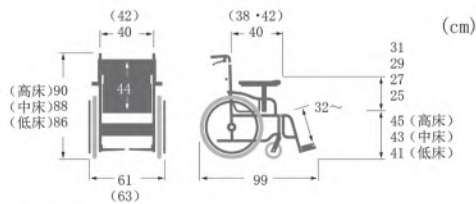

*各尺寸不含座背垫等的厚度。


护理用 **16** 后轮
in



KZM16-40(42)-45	高座面	前轮6in	(14.8kg)
KZM16-40(42)-43	中座面	前轮6in	(14.8kg)
KZM16-40(42)-41	低座面	前轮6in	(14.8kg)

SY1-KZM-40(42)

- 折叠尺寸 高床: 全长66×全高74×全宽30
中床: 全长66×全高72×全宽30
中床: 全长66×全高70×全宽30

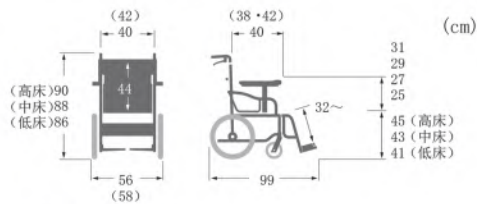

*各尺寸不含座背垫等的厚度。



KZM系列的特征


合身性



座垫深度可调节
座垫深度可三阶段调节
(38・40・42cm)



背垫松紧度可调节
根据体型，可调节背垫的松紧度。

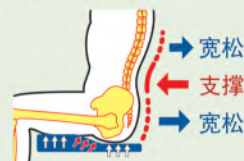

功能性



活动扶手可上掀
扶手可向后方掀起，方便顺利从床等其他地方移乘到轮椅。



扶手高度可调节
方便需要使用厚座垫以及身高较高的人根据需要调节合适的高度。
四阶段调节
(25・27・29・31cm)

便利性



防滑座垫
防止臀部向前滑动。
(座垫底部防滑设计)



收纳袋
背垫附大容量收纳袋。

下单时请选择



●座宽选择 40・42cm

※座宽选择，在坐下来的状态下臀部宽度+3~5cm，护理人员的手可以伸进去程度。

2
color

●座背垫颜色选择

2色

No. 69



网格蓝

No. 88



环保黑
(皮革)

座宽多样选择的多功能型轮椅

KA800 系列

自走用
(护理兼用) **22** 后轮
in




座背垫: A9

KA822-40(42)B-H	高座面	前轮7in	(16, 4kg)
KA822-40(42)B-M	中座面	前轮7in	(16, 4kg)
KA822-40(42)B-LO	低座面	前轮6in	(16, 1kg)
KA822-45B-H	高座面	前轮7in	(17, 4kg)
KA822-45B-M	中座面	前轮7in	(17, 4kg)

SY2-KA8-40(42·45)

●折叠尺寸: 全长77×全高63.5 (66.5/69.5) ×全宽31

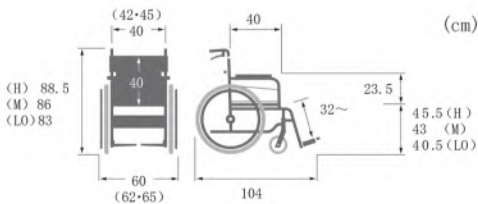

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

护理用 **16** 后轮
in




座背垫: A11

KA816-40(42)B-M	中座面	前轮7in	(14, 8kg)
KA816-40(42)B-LO	低座面	前轮6in	(14, 5kg)
KA816-40(42)B-SL	超低座面	前轮6in	(14, 5kg)
KA816-45B-M	中座面	前轮7in	(15, 8kg)

SY1-KA8-40(42·45)

●折叠尺寸: 全长71×全高61.5 (63.5/66.5) ×全宽28

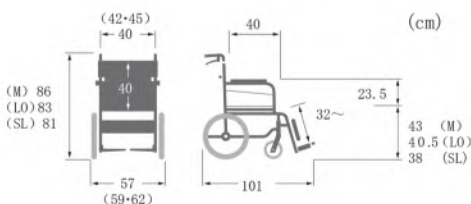

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

下单时请选择

●座宽选择 40·42·45cm



※座宽选择, 在坐下来的状态下臀部宽度+3~5cm, 护理人员的手可以伸进去程度。

※45cm座背垫颜色仅A9/A11可选。

3 color ●座背垫颜色选择 3色


※45cm座宽2色选择



方格绿



方格紫

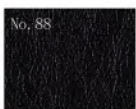

环保黑
(皮革)



KA800 的特长

可调式座背垫

可根据使用者的体型调节座背垫的松紧度。




背垫

根据背部的形状，可以调节背垫的松紧度。

座垫

通过调节座垫松紧度，可防止臀部向前移位。

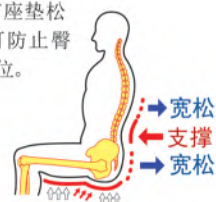

简单拆卸!!

座背垫可简单拆卸。



全座宽通用

- 背垫 (2cm厚)
- 座垫 (3cm厚)

活动脚式 (可拆卸) 活动扶手 (可上掀)



活动脚向内

脚部可向内收纳，适合左右无多余空间时使用。(左右均向内旋转时)



活动脚向外

脚部可向外侧打开，适合移乘时使用。(左右均向外旋转时)



活动扶手上掀

扶手可向后方掀起，方便顺利从床等其他地方移动到轮椅。

乘坐舒适的曲线车架轮椅

WAVIT/WAVIT+ 系列

WA

曲线标准型

自走用 (护理兼用) **22** 后轮 in


护理用 **16** 后轮 in



WA22-42S 中座面 前轮6in (12.2kg)
SY2-WA-42

WA16-42S 中座面 前轮6in (10.9kg)
SY1-WA-42

● 折叠尺寸 22in: 全长95×全高67×全宽33
16in: 全长87×全高67×全宽30

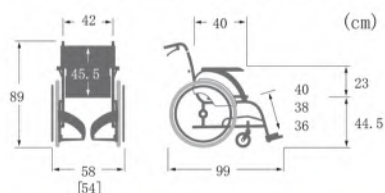

* [] 内为16in的尺寸
* 各尺寸不含座背垫等的厚度。


● 紧凑型立体车架

容易驱动 (自走用)

全宽58cm (座宽42cm) 的基础上, 扶手圈更贴近身体, 驱动时更好使力。

宽脚部车架

脚部车架比标准宽3cm, 确保了脚下空间, 是更方便护理者和使用者使用的的设计。

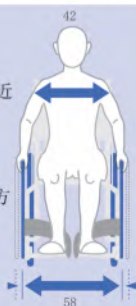

下单时请选择

2 color

● 座背垫颜色选择 (2色)

A13

No. 95



方格深蓝



米黄色

WAP

曲线多功能型



自走用 (护理兼用) **22** 后轮 in


护理用 **16** 后轮 in



WAP22-42S 中座面 前轮6in (14.2kg)
SY2-WAP-42

WAP16-42S 中座面 前轮6in (12.8kg)
SY1-WAP-42

● 折叠尺寸 22in: 全长71×全高67.5×全宽34
16in: 全长62.5×全高67.5×全宽30

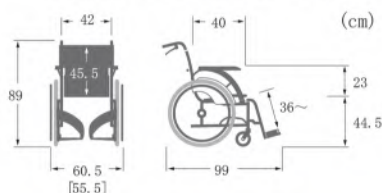

* [] 内为16in的尺寸
* 各尺寸不含座背垫等的厚度。

● 容易抓握的活动脚开关&扶手开关

与传统的用手指来操作的开关不同, 用整只手抓握操作, 力气弱小的人群也能简单使用。

脚部能够打开和拆卸, 扶手可向后方掀起, 方便移乘。



活动脚向内



活动脚向外



容易抓握的扶手开关



活动扶手可上掀

WAVIT 的特长



抑制向前移位的双层座垫



支撑臀部的双层座垫以及座垫下调节带，增加了乘坐的舒适性，并可防止长时间使用可能造成的座垫下垂。

独特的曲线车架

三条曲线车架贴合身体线条，乘坐舒适，长时间乘坐也不易疲劳。



● 抑制向前移位的车架形状 ①②③

因波浪形车架给了身体很好的支撑，即使没有厚座背垫和松紧调节也能保证乘坐的舒适度。

WAVIT车架




普通的标准轮椅车架



压力测定

※内部测试

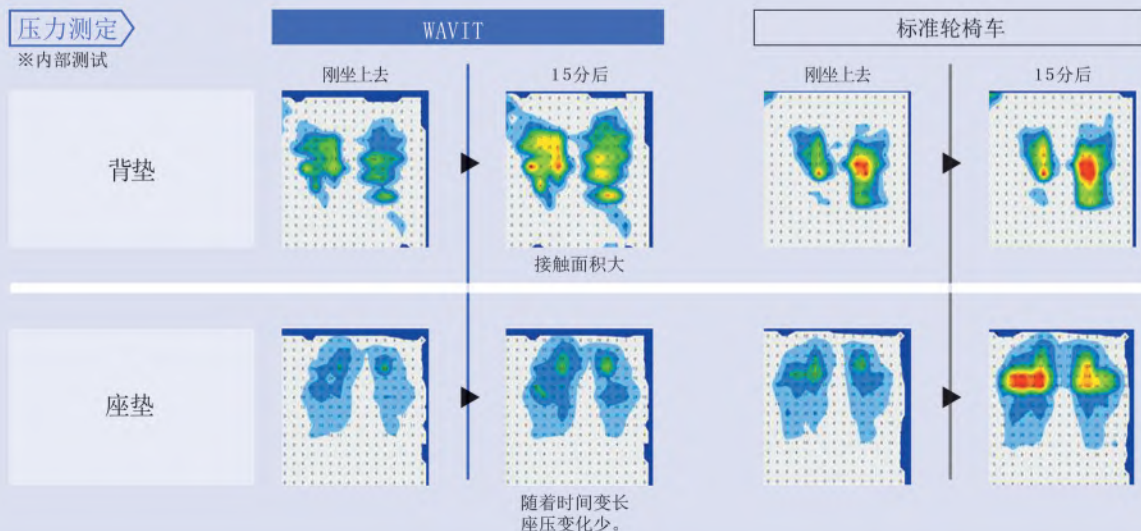



KAK-LO (低座面) 系列

自走用
(护理兼用) **22/18** 后轮
in



KAK20-40B-LO

SY2-KAK-40

超低座面 前轮4in

(16.6kg)


KAK18-40B-LO

SY2-KAK-40

超低座面 前轮4in

(16.4kg)

●折叠尺寸 20/18in: 全长71×全高66×全宽35
16in: 全长71×全高66×全宽31

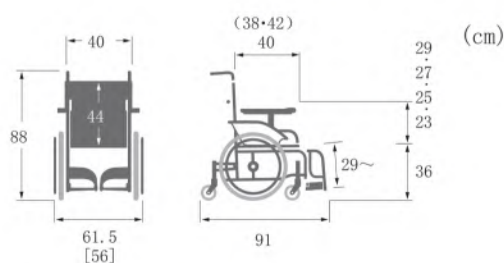

*[]内为66in的尺寸
*各尺寸不含座背垫等的厚度。

下单时请选择

3 color ●座背垫颜色选择 **3色**

A9



方格绿

A11



方格紫

No. 88



环保黑
(皮革)

护理用 **16** 后轮
in



KAK16-40B-LO

SY1-KAK-40

超低座面 前轮4in

(15.7kg)



超低座面 (前座高36cm)

背垫可调节&座深可调节，
机型紧凑功能充实的不爆胎式样！
超低坐高36cm!!

可在70cm宽的拐角处轻松拐弯。

活动扶手(可上掀)

活动扶手可向后方掀起，方便顺利从床等其他地方移乘到轮椅。



活动脚(可拆卸)


脚部可向外打开，上下轮椅以及用脚驱动时，确保了充裕的空间。



座深可调节


座深可三阶段调节。
(间距2cm)

※出厂时，座深设定为40cm。

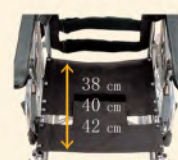

脚后跟带标准配备

防止脚后跟向后滑落。掀起脚踏板时，使用者更容易坐下及站起。

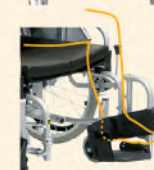

对合身的追求 “Module” Wheelchair

为了让您可以选择更合身的轮椅

模块化轮椅的主要调节和调整

模块化轮椅，指的是可以根据使用者的需求进行调节的性能优越的轮椅。

以下解说根据使用情况的变化可做的调节和调整。

可做座高的调节和型式的转换

座面高度的调节



车轮安装位置（KA800系列）

通过改变前后轮的尺寸和安装位置，可以调节座面的高度。

※可能涉及到车轮的更换。

自走用
(护理兼用)

护理用

型式的转换

根据使用情况可以跟换车轮，在自走用和护理用之间自由转换。



※必须更换车轮。

*根据车架结构的不同，有些车型不能转换。



调整作业务必请专门人士进行操作。

可根据使用者的体型进行调节

座背垫松紧度调节



粘扣带固定式，调节简单。

根据背部和臀部的形状，可横向调节松紧度，减轻背部的压力。

※为了形象说明，图片中轮椅是拆掉厚座背垫后的状态。

座位深度调节



通过调节伸缩座垫管调节座深。通过增减座深调节用座垫管的个数，在固定间距做阶段调节。



脚踏板高度调节



无段式调节

使用附属的工具，在任意的高度进行调节。



阶段式调节

根据脚踏板安装的位置，在固定的间距间调节。



扶手高度调节



阶段式调节

根据使用者的体型以及座垫的厚度阶段式调节扶手的高度。



一台三用的步行器兼轮椅车

AY18 系列



步行器 自走用 (护理兼用) 护理用 **18** 后轮 in

自走用 (护理兼用) 护理用

“三种使用方式”外出时的强力支撑!!

步行器



座背垫: NO. 85

一键式操作
完成扶手前后转换



1台3用的
步行器兼轮椅车



AY18-40

SY2-AY-40

低座面 前轮6in

(13.5kg)


AY18-45

SY2-AY-45

低座面 前轮6in

(14.3kg)

● 折叠尺寸 座宽40cm: 全长86×全高79×全宽31
座宽45cm: 全长86×全高79×全宽32

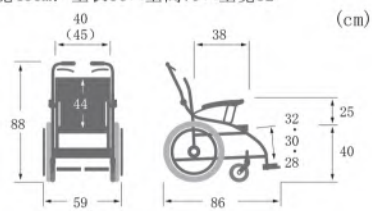

* () 内为折后的尺寸
* 各尺寸不含座背垫等的厚度。

脚踏板高度调节



可进行三阶段调节。
(间距2cm)



折叠时

● 作为步行器



【步行】
作为步行器
⇒ 扶手位置往前
置物袋
⇒ 置于座面上

● 作为自走用轮椅



【驱动】
作为自走用轮椅
⇒ 扶手位置往后
置物袋
⇒ 挂在后面

● 作为护理用轮椅




【乘坐】
作为护理用轮椅
⇒ 扶手位置往后
置物袋
⇒ 可随身携带

下单时请选择

2 color ● 座背垫颜色选择 (2色)

※ 附专用置物袋。

No. 82×No. 83

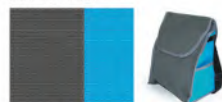

炭灰色*浅蓝色

No. 85



鲜绿色

简易便携式轮椅，外出好帮手。
适合旅行、外出等短时间使用。

旅行 系列



护理用 **12** 后轮 in



★旅行系列不适合长时间使用。


KA6

SY1-KA6-35

中座面 前轮6in

(8.9kg)

●折叠尺寸：全长64×全高61×全宽27

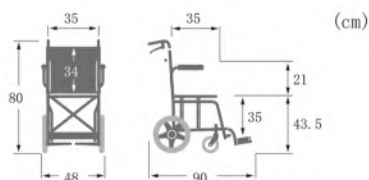

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

下单时请选择

2 color

●座背垫颜色选择 (2色)

No. 80



深紫色

No. 81



条形绿

另售



(专用旅行收纳袋)

●省空间、便于保管

体型小、折叠后可收纳于专用收纳袋。



折叠时

●连动式停车刹车



→ 护理刹车
→ 停车刹车



和停车刹车连动的简易型护理刹车。
停车时可操作刹车手把固定车轮。

背部・脚部连动构成自由躺靠型轮椅。
可作为简易活动床使用。

RR60 系列



护理用 **12** 后轮 in



座背垫：NO. 43



座背垫：NO. 41


RR60NB

中座面 前轮7in

(24.0kg)

SY1-RR60-44

●折叠尺寸：全长101×全高67×全宽58.5

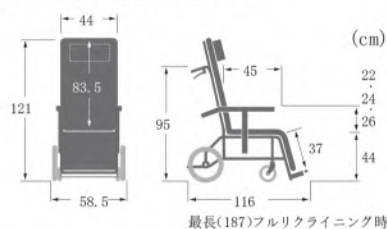

*扶手高度、全长、全高、脚踏板高度指的是靠背在最直起的时候的尺寸。
*各尺寸不含座背垫等的厚度。

下单时请选择

2 color

●座背垫颜色选择

2色

座背垫厚度

(背垫厚度: 5.5cm)
(背垫厚度: 5.5cm)
(腿靠垫厚度: 5.5cm)

No. 41



紫色
(布制)

No. 43




绿色
(皮革)

●躺靠功能

背部和脚部连动，诱导躺靠姿势。

背部、腿部连动调节

<可调范围内任意角度调节>

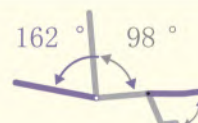


●折叠脚踏板



移乘及收纳时，脚踏板可折叠。

紧凑式躺靠型轮椅。

KXL 系列

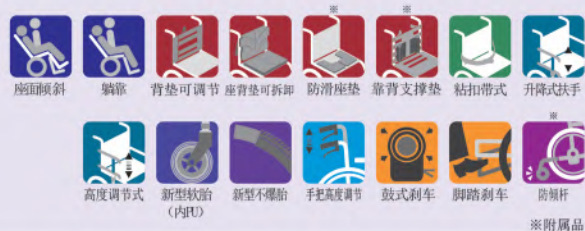

※附属品

护理用 **16** 后轮 in



KXL16-42-EL
座背垫: NO. 47

KXL16-42
座背垫: A13



活动脚式

KXL16-42

SY1-KXL-42

中座面 前轮6in

(21.0kg)



骨科脚式

KXL16-42EL


SY1-KXL-42

中座面 前轮6in

(23.5kg)

●折叠尺寸: 全长91×全高60×全宽57.5

※)骨科脚式的尺寸

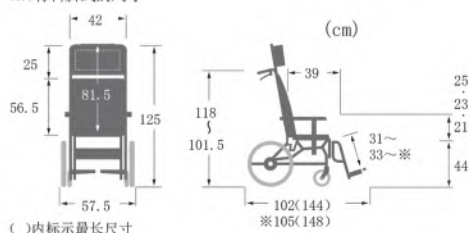

()内标示最长尺寸

*扶手高度、全长、全高、脚踏板高度指的是靠背在最直立的状态时候的尺寸。
*各尺寸不含座背垫等的厚度。


“无拘无束”保持坐姿

●座面调节功能 (座面调节角度: 0~20°)



<无阶段调节>

●靠背调节功能 (靠背调节角度: 90~120°)

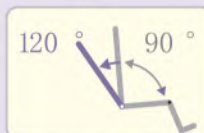

<无阶段调节>



前后折叠式

骨科脚&活动脚式
※腿靠垫的安装位置可调节



扶手高度调节



脚踏刹车



调节式座背垫

下单时请选择

2 color

●座背垫颜色选择

2色



A13
方格深蓝
(布制)



No. 47
木皮深绿
(皮革)

脚部选择



活动脚
脚部可向外旋转。



骨科脚&活动脚
脚部角度可上下调节。

坐姿保持的典范

KPF 系列



护理用 **16** 后轮 in




KPF16-42

高座面 前轮6in

(20.5kg)

SY1-KPF-42

●折叠尺寸：全长101×全高86×全宽38

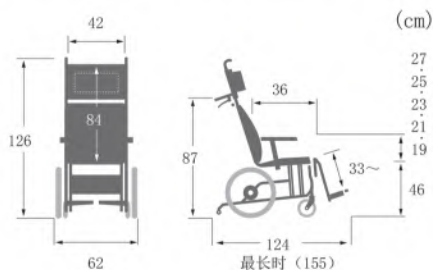

*扶手高度、全长、全高、脚踏板高度指的是靠背在最直起的状态时候的尺寸。
*各尺寸不含座背垫等的厚度。

下单时请选择

2 color

●车架颜色选择 2色

红色


香槟色



2 color

●座背垫颜色选择 2色

No. 68×No. 69

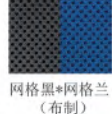

No. 88




新躺靠构造



靠背在反复“放倒·拉起”后，臀部仍然没有移位，能保持原来的坐姿。

倾斜·躺靠角度

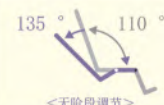

左右独立可调节背垫·靠背支撑垫

可根据背部的形状调节背垫松紧度。减轻背部的压力，防止身体往左右两边倾倒。

※因为是粘扣带调节式，也可变更位置。



低反发海绵


柔软地包裹住身体，乘坐舒适，保持坐姿。



简单折叠收纳、紧凑



座背垫可拆卸，安全卫生，可持续使用。

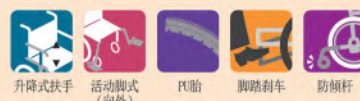

KS 系列



后轮是方便上台阶的12英寸。



座背垫：绿色



座背垫：黄色


KS12

SY1-KS-39

高座面 前轮5in

(14.3kg)

●折叠尺寸：全长91.5×全高85×全宽53

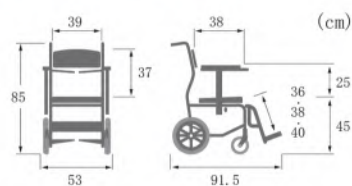

*各尺寸不含座背垫等的厚度。

下单时请选择

座背垫是柔软的防滑材质。

材质：EVA

2
color


●座背垫颜色选择

黄色

或

绿色

(尺寸·厚度通用)

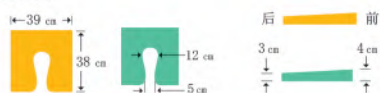

※为了改良商品，有可能无预告的进行式样变更，敬请谅解。

身体、座垫都好清洗的沐浴用轮椅

波浪形车架

从背部到臀部都易清洗的波浪形车架。加大与身体之间的间隙，从后面和侧面都易伸手的车架构造。

座背垫可拆卸

背垫部位、座垫部位均可拆卸，随时随地保持清洁。



简单・牢固固定
座背垫固定旋钮




与座背垫一体的旋钮可90度旋转。座垫的偏移度小稳固固定。

脚踏板高度可调节



(2cm间距)
可三阶段调节。

轮椅尺寸的测量方法

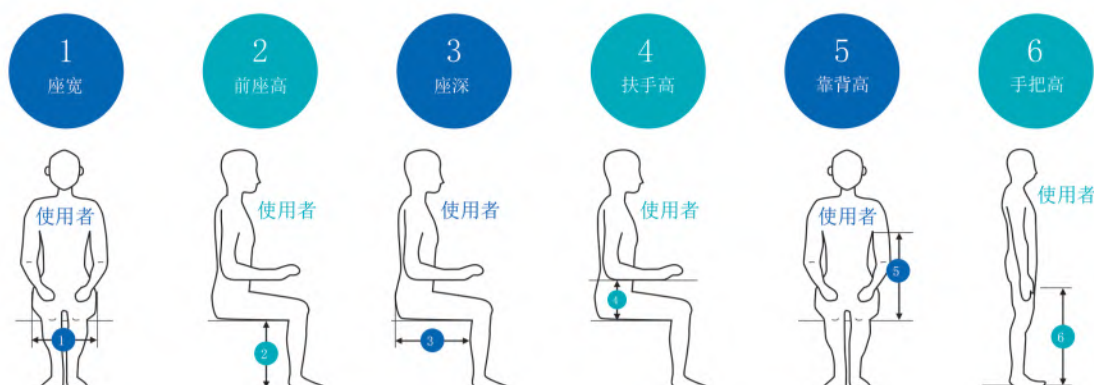

部分	尺寸标准	影响
1 座宽	●臀部的宽度 + 3~5cm ※ 请考虑着装的厚度来选择坐垫。	●对驱动，保持坐姿，移乘的影响。 ※座宽太宽时，身体离扶手圈太远，必须伸开手臂进行驱动，驱动会变得困难。而且臀部容易向旁边移位破坏坐姿。但是，容易移乘。 ※座宽太窄时，容易保持坐姿，但是乘坐不舒适，不容易移乘。
2 前座高	●膝盖以下到脚后跟的高度 + 5~8cm ※用脚驱动的情况下+0~2cm	●对驱动，保持坐姿，移乘，周边环境的影响。（图2） ※前后座高相差较大时，向靠背施加体重时能安定地坐在座位上，但是腰部周围会感觉不舒适，容易破坏坐姿。另外，在移乘和站立时，即使臀部往前方移动，后背直起时臀部依然有可能向后方滑动。 ※前后座高相差较小时，容易往前移位。
3 座深	●从膝盖内侧到臀部底部的长度 - 3~7cm	●对保持坐姿，移乘的影响。（图1） ※太短时，不易保持坐姿。而且压力集中到臀部，容易造成疼痛。 ※太长时，会压迫膝盖，而且臀部够不到靠背，不仅容易滑坐、疲劳，长期使用还容易造成驼背。
4 扶手高	●手肘水平弯曲时座面到手肘的高度 + 3~5cm	●对保持坐姿，移乘，周边环境的影响。 ※太高时，手肘靠在扶手上时肩膀呈抬起状态。容易造成疲劳，肩膀酸痛。 ※太低时，不容易保持坐姿。而且为了保持手腕的稳定性须一直处于受力状态，很容易疲劳。 ※需要借助扶手支撑站立移乘的人，请选择容易支撑的合适高度。 ※选择时需要考虑到座垫厚度以及柔软度的影响。
5 靠背高	●座面到腋下的高度 - 5~8cm	●对保持坐姿，移乘的影响。 ※太低时，不易保持坐姿，容易滑坐，长期使用还容易造成驼背。 ※无法保持坐姿平衡时，可根据情况选择有带靠背支撑以及头部支撑的。
6 手把高	●护理人员虎口到地面的高度 + 0~5cm	●对护理人员推动轮椅的影响。 ※太高时，则推动时费力。 ※太低时，容易导致护理人员腰部酸痛。

选择轮椅的基础知识

部位	尺寸标准	影响
靠背角度	●一般在90° ～ 95之间	●对保持坐姿，驱动的影响。 ※驼背和骨盆后倾等脊椎变形的情况下，请根据骨架设定合适的角度。 ※若脊椎变形人群追求坐姿的保持以及驱动的稳定，推荐选择松紧度可调节靠背。
脚踏板离座面高度	●一般选择比下腿长少2.5cm的长度。 ※选择时需要考虑座垫的厚度产生的影响。 	●对保持坐姿，移乘的影响。（图3） ※太长时，膝盖下垂，压迫到大腿，驱动时容易向前倾滑。 ※太短时，容易造成股关节弯曲，膝盖上抬，大腿无法接触座位，导致压力集中在臀部，膝盖易摇晃。并且容易向前移位。
脚踏板离地面高度	●一般是距离地面5cm以上。	●对驱动，保持坐姿，周边环境的影响。 ※离地面太低时，尤其在室外，脚踏板容易碰到地面的石头或者凹凸不平的地方，很危险。
驱动轮直径	●室外用的轮椅，为了提高驱动效率以及过台阶更轻松，一般会选择直径大的车轮（22英寸）。 ※但是，请结合身材的大小和上肢的力量来选择。	●对驱动（扶手圈的操作性），移乘，周边环境（回旋的空间）的影响。 ※自走用轮椅用于护理时，车轮大乘坐舒适，容易跨越台阶。 ※上肢的可动区域狭窄以及用手肘驱动车轮的情况下，增大车轮直径的同时，为了容易驱动，也有降低车轴位置的情况。
前轮直径	●一般选择4～7英寸。	●使用大直径的前轮，行走时收到的阻力较小，但重量增加以及会影响到脚踏板的位置。

尺寸不合适的例子・・・

〈座深太长〉
对坐姿的影响

★
容易疲劳的坐姿。



〈图1〉

〈座高太低〉
对坐姿的影响

★
膝盖上浮，双脚容易张开，臀部容易向前移位。



〈图2〉

〈脚踏板高度太高〉
对坐姿的影响

★
膝盖上浮，双脚容易张开，臀部容易向前移位。




〈图3〉

了解更多！「轮椅」

使用于轮椅的材料

●介绍用于轮椅主车架的材料。

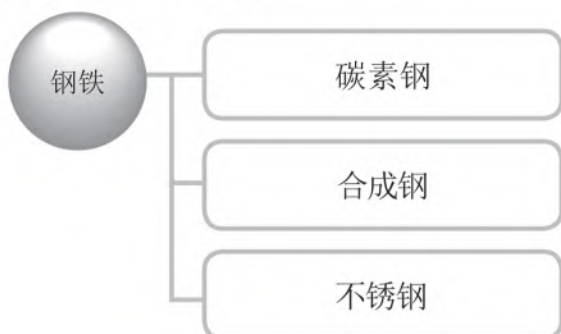

根据使用的环境选择！

1. 通道的宽度

根据轮椅通行、转弯以及旋转所需要的宽度，以及操作人员的能力和轮椅款式的不同而不同。

宽度

如果是护理用轮椅，为了通过入口，轮椅的宽度+50mm即可通过。
如果是需要用手操作扶手圈的自走用轮椅，需要+150mm左右比较合适。
如果手的机能受损容易左右摇晃，则需要更充足的空间。


旋转空间

自走用轮椅的情况下，如图示两个驱动轮的轴心距的中心作为旋转中心所需要的旋转半径，在这基础上加上合适的空间，即是所需最小的旋转空间。

※为了缩小旋转半径，
可缩小前轮和后轮轴间距离



〈六輪車〉

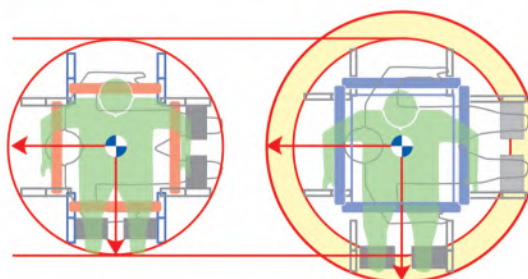

六轮轮椅

一般的轮椅

2. 通道〈路面阻力〉

在木地板、石子路上行走所需的驱动力是有很大差别的。

特别是自走用的轮椅会受到很大的影响，需要根据平常使用的环境来选择轮椅。



合金系列	JIS	特长	拉伸强度（参考）
Al—Cu系 （2000系）	2024	机械构造用合金。高强度的铝合金，耐腐蚀性弱但强度高。	40~50kgf/mm ²
Al—Mg系 （5000系）	5052 5056	适度的强度、加工型、耐腐蚀性。 5056比5052的强度高。适用于焊接。	20~30kgf/mm ² 30~45kgf/mm ²
Al—Mg—Si系 （6000系）	6061 6063	中强度机械构造用合金。耐腐蚀，但是焊接后强度低。 代表性的挤压合金。	15~30kgf/mm ² 15~25kgf/mm ²
Al—Zn系 （7000番系）	7075 7003	铝合金中强度最高的。耐腐蚀性较弱。 在日本问世的合金。焊接后强度不会下降。	30~55kgf/mm ² 25~35kgf/mm ²

河村轮椅的主要材质

关于姿势

● 你是否有这些错误的坐姿呢？

易滑坐姿

背部变圆，
背部・腰部・脖子疼痛。

骨关节无法正常弯曲，背部
难以撑起，加大了护理者的
负担。



产生向前滑落的压力，乘坐不舒适。
且容易产生褥疮以及从轮椅上滑落。

紧接着造成
膝盖弯曲。

倾斜坐姿

背部弯曲、
造成背部和腰部疼痛。

需要用手支撑身体，对
吃饭和轮椅的操作产生
障碍。



双脚难以打开，给更换尿布
增加了难度。

往重心重的方向倾斜，
乘坐不舒服，容易产生
褥疮。

瘫坐在轮椅上，身体也很难移动。

导致乘坐不舒适，容易产生褥疮。

要点

- 长时间保持这些坐姿，对于高龄者来说不仅痛苦，也容易产生疮疤以及束缚行动，增加从轮椅上翻落的危险性。
- 若使用符合身体机能的合适的轮椅，就可不使用绑带或抑制带。



轮椅车专家

河村轮椅

URL <http://www.kawamura-cycle.cn>

中国工厂：漳州立泰医疗康复器材有限公司
363900 福建省漳州市长泰县古农农场银塘工业区
TEL: 0596-6328839 FAX: 0596-6328813

中国销售部：
361026 福建省厦门市海沧区嵩屿南一里232号教师酒店1319室
TEL: 0592-6206553 FAX: 0592-6206569

< 代理店 >



爱护环境，珍惜纸箱等可再生资源。

2020.06版